

Speciale bedden

tom

Kinderbed

- matrasmaat 132 x 67,5 cm en rugsteunverstelling tot ca. 60°
- in hoogte verstelbaar en zwenkbaar rasterwerk ligvlak (anti-/Trendelenburgpositie)
- dubbel beveiligde en op 3 niveaus instelbare onrusthekken
- omvangrijk kleur- en accessoireaanbod



sprint

Brancard


- zeer goede rijeigenschappen door geïntegreerde wielen en optionele 5e wiel
- 2-gedeelde, hydraulisch in hoogte verstelbaar en zwenkbaar ligvlak met rugsteunplaatsing
- optioneel Röntgen doorlatend ligvlak voor opnamen d.m.v. C-boog of standaard Röntgenapparaten
- uniek matrassysteem met drie verschillende varianten (standaard, comfort, transfer)
- gesloten hefzuilconstructie garandeert efficiënte reiniging
- omvangrijke stootbeschermingselementen en onderbrengingsmogelijkheden voor accessoires
- veilige werklust 230 kg



rooming in

Zuigelingenbed

- transparante en uitneembare zuigelingenmand met ventilatieopeningen
- traploos in hoogte verstelbaar en zwenkbaar ligvlak
- geschikt voor het onderdoorrijden van een universeel ziekenbed

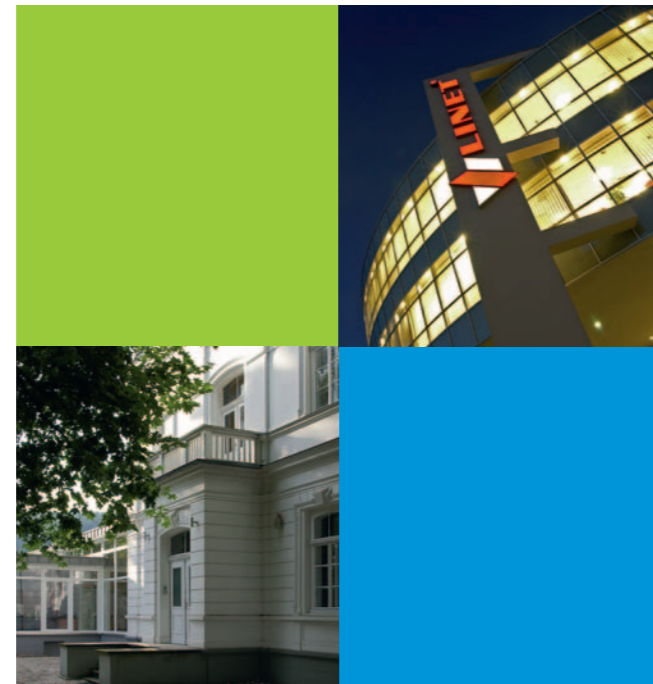

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Functionele elegantie in de verpleging

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6

D-58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377/784-0

Fax: +49(0)2377/784-163

E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de

wissner-bosserhoff N.V. Belgium S.A.

Egide Walschaertsstraat 15/15

B-2800 Mechelen

Tel.: +32 (0)15 21 08 41

Fax: +32 (0)15 29 14 64

E-mail: info@wi-bo.be

www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42

NL-3316 KA Dordrecht

Tel.: +31 (0)78 652 18 50

Fax: +31 (0)78 652 18 55

e-mail: info.nl@wi-bo.de

www.wi-bo.com

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Functionele elegantie in de verpleging



Bedden-portfolio
Ziekenhuis

Universele bedden – Hotel Design

image – Innovatieve mobilisatie

in de kamer met optionele servicemogelijkheden

- doorlopende onrusthekken verdwijnen bij geen gebruik volledig onder het ligvlak, voor onbeperkte toegang tot de patiënt en accessoires, evenals voor het overplaatsen van de patiënt zonder openingen
- Mobi-Stick en Mobi-Lift® (opties), evenals voorgeprogrammeerde beduistapposities ondersteunen bij de zelf-mobilisatie en fysiotherapie, bijv. op de afdelingen chirurgie en orthopedie
- voorkoming van doorligwonden door dubbele retractie van de rug- en beensteun
- voorkoming van valpartijen door vier onrusthekposities en rem- alarm (optie)



eleganza smart Hotel

Veiligheid en flexibiliteit

- voldoet meer dan alleen maar aan de nieuwe norm IEC 60601-2-52 door de oplossing van de kleine middenopening met afstand onder de 60mm; daardoor hoge patiëntveiligheid in elke werkpositie, ook zonder beperkende middenopeningprotector
- gedeelde onrusthekken en geïntegreerde bedieningselementen ondersteunen de mobilisatie
- hoge modulariteit
- hoge slijtvastheid bij gering gewicht van de onrusthekken



altura

Economisch en gerieflijk

- economische toegang tot een modern en gerieflijk hotel-design
- doorlopende onrusthekken = 100% bescherming in elke werkpositie
- vermindering van VBM* mogelijk door verlaging van het onrusthek aan het voeteneinde
- hoge functionaliteit met nuttige additionele eigenschappen: 5e wiel voor gemakkelijk transport, bedden-bediening per voetschakelaar, evenals uitneembaar ABS-ligvlak voor de verlichting van de verpleging



latera thema

Lateralisatie geeft verlichting van de verpleging

- vermindering van de lichaamsbelastende werkzaamheden door de lateralisatie tot 15°
- tijdsbesparing bij verpleegroutine tot 15%
- grote ontlasting van het verplegend personeel, vooral bij nacht- en weekenddiensten
- hoog rendement (ROI) door duurzame proceskostenbesparing en sterke motivatie van de verpleegkrachten
- doorlopende onrusthekken voor veiligheid zonder openingen
- gerieflijk design met talrijke decorvarianten



Laterale zwenking verlicht de dagelijkse verpleging

Het is geen geheim: verpleging en verzorging van zieken en bejaarden worden statistisch gezien tot de meest risicovolle beroepen gerekend. Naast infecties en stress leiden verpleegkrachten bijzonder vaak aan rugklachten, blokkeringen en vervormingen van de wervelkolom, met vaak blijvende schade. >>

Bedden voor de intensieve verpleging

multicare

Het nieuwe bed voor intensieve verpleging van topkwaliteit

In-bed-therapie

1. Kinetische therapieaanpak door laterale therapie tot 30°
2. Doorligwonden - therapiesysteem virtuoso
3. Rechtop in bed zitten dankzij orthopedische zitpositie

Diagnose in bed


4. C-boog-geschiktheid van de rugsteun
5. Röntgengeschikte rugsteun met geïntegreerde Röntgencassettehouder
6. Geïntegreerd weegsysteem met opslag van gewichtsgegevens en analyse-instrument, evenals voorkoming van uit bed vallen door bed-uitstap-alarm

Flexibiliteit

7. Transportverlichting door centrale 5e loopwiel
8. Voorkoming van valpartijen door automatische bedrem i-brake

De verdere voordelen zijn bij multicare standaard

- productvormgeving volgens nieuwe norm IEC 60601-2-52; in het bijzonder dubbele veiligheid, onrusthekconcept en elektrische veiligheid
- LCD-touchscreen voor eenvoudige bediening met één hand
- veilige werklast van 250 kg
- laterale zwenking tot 15° voor de verlichting van de verpleging

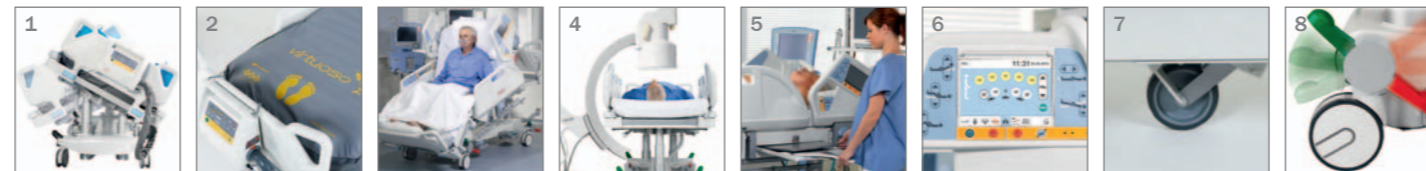

eleganza 3XC

Perfect voor kortstondige verpleging en intensive care-afdelingen

- zijdelings inschuifbare cassettehouder voor Röntgenfoto's van longen
- C-boog-gebruik van het bovenlichaam tot aan het bekkengebied
- ergoframe-ligvlakstelsel ter voorkoming van doorligwonden
- compatibiliteit met actieve matrassystemen
- mobilisatiehulp Mobi-Lift®
- geïntegreerd weegsysteem (optioneel)

Universele bedden – Klinik Design

latera acute

Lateralisatie verschaft verlichting in de verpleging

- vermindering van de lichaamsbelastende werkzaamheden door de lateralisatie tot 15°
- tijdsbesparing bij verpleegroutine tot 15%
- grote ontlasting van het verplegend personeel, vooral bij nacht- en weekenddiensten
- hoog rendement (ROI) door duurzame proceskostenbesparing en sterke motivatie van de verpleegkrachten
- ¾ - onrusthekken maken het gebruik van hoge matras-systemen mogelijk tot 17cm
- modern design met hoogwaardige kunststof materialen



Uw 10 voordelen van de lateralisatie:

Verlichting voor de verpleging

1. bedverschoning en verbandverwisseling
2. basisverpleging
3. mobilisatie
4. overplaatsing (naar het bed, brancard, transportstoel)

Preventie en verzorging

5. wondverzorging
6. preventie van doorligwonden
7. verlichting van de ademhaling
8. brandwonden
9. zuigelingenverzorging
10. bezoekersopvang

>> Door gebruik van de laterale zwenking kan in het bijzonder rugbelasting aanzienlijk worden verminderd, aangezien mobilisatievoorvallen weliswaar door het verplegend personeel worden beheerst, maar nu zonder krachtsinspanning en daardoor rugsparend kunnen worden uitgevoerd. De laterale zwenking aan beide kanten van de latera en multicare bedden, verlicht de dagelijks terugkerende verpleegtaken. Niet alleen wordt de krachtsinspanning bij het verplegend personeel verminderd, maar ook wordt een attente en respectvolle omgang met de patiënt mogelijk.

eleganza 3

Specialist van normale afdeling tot kortstondige verpleging

- flexibel onrusthekconcept mogelijk gemaakt
 - beschermingsaanpassing aan het individuele valrisico
 - mobilisatie- en opstahulp in de zin van de expertstandaard voor het voorkomen van valpartijen**
 - volledige bescherming voor patiëntveiligheid en veilige fixatie in de zin van de 'BfArM'***
 - ¾-bescherming vormt geen VBM*
 - vrije en veilige toegang tot de patiënten in de verpleegpositie
- voorkomen van doorligwonden in het bekken- en schoudergebied, evenals permanente ondersteuning van het hoofd in alle bedposities door het Ergoframe®-concept
- vaststaand hoofddeel en 5e centrale wiel ter vermindering van beschadigingen aan de muur en deurkozijnen
- Mobi-Lift® (optie) voor de autonome mobilisatie



eleganza smart Klinik

Veiligheid en flexibiliteit

- voldoet meer dan alleen maar aan de nieuwe norm IEC 60601-2-52 door oplossing van kleine middenopening met afstand onder de 60mm, daardoor patiëntveiligheid in iedere werkpositie, ook zonder beperkende middenopening-protector
- gedeelde onrusthekken en geïntegreerde bedieningselementen ondersteunen de mobilisatie
- hoge modulariteit
- hoge chemische weerstand bij gering gewicht van de onrusthekken



eleganza smart junior

Speciaal voor jeugdige patiënten

- bed voor kinderen en jeugd met een ligvlakmaat van 170 x 80cm
- geïntegreerde ¾-onrusthekken ter voorkoming van valpartijen
- dubbel veilig dankzij de GO-veiligheidsknop



* VBM - Vrijheidsbeperkende maatregelen | ** vgl. Expertstandaard voorkomen van valpartijen ('Sturzprophylaxe') van feb. 2005, hfdst. 2.6.2.7., pag. 71/72. Info krijgt u via www.dnpp.de
 *** 'BfArM' - Informatie voor de vakkringen van het (Duitse) rijksinstituut voor medicijnen en medische producten van 8 december 2003