



wissner- bosserhoff

Möbel für ein lebenswertes Ambiente

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49 (0) 23 77 / 784-0
Fax: +49 (0) 23 77 / 784-163
E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de



wissner- bosserhoff

stretcher sprint

Möbel für ein lebenswertes Ambiente



stretcher sprint



Die qualifizierte Betreuung von Menschen in kritischen und lebensbedrohlichen Situationen stellt höchste Ansprüche an das Pflegepersonal und die Krankenhausausrüstung. Diesen Ansprüchen muss man begegnen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Aus diesem Grund haben wir bei der Entwicklung des Stretchers sprint zwei klare Ziele verfolgt: die Sicherheit des Patienten und die Arbeitserleichterung für das Pflegepersonal.

Der Stretcher sprint gewährleistet den schnellen Patiententransport, eine leichte Handhabung und ermöglicht erste wichtige Untersuchungen. Die äußerst stabile und mechanisch höhenverstellbare **Hubsäulenkonstruktion** gewährleistet eine leichte und schnelle Reinigung und leistet im Zusammenspiel mit den durchgängig glatten Oberflächen einen wichtigen Beitrag zur Hygiene.

Eine **röntgenfähige Liegefläche** erlaubt Aufnahmen mittels eines C-Bogens. Bei Einsatz eines zusätzlichen Röntgenkassettenhalters, der wahlweise auf dem Liegeflächenrahmen oder direkt hinter der Rückenlehne positioniert werden kann, besteht die Möglichkeit, wichtige Röntgenaufnahmen direkt auf dem Stretcher vorzunehmen. Dem mit der Umlagerung eines Patienten verbundenen Gesundheitsrisiko wird somit vorgebeugt.

Das einzigartige Matratzensystem bietet drei verschiedene Varianten. Die Matratze **sprint plus** erleichtert den Patiententransfer, da sie über ausziehbare Pads verfügt, die den Freiraum zwischen Stretcher und Operationstisch, Krankenhausbett oder Röntgentisch schließen. Die viskoelastische Oberfläche der Matratze **sprint comfort** sorgt für ein bequemes Liegen auch bei längerer Verweildauer auf dem Stretcher. Umfangreiche Stoßschutzelemente und zahlreiche Aufnahmemöglichkeiten für Zubehör runden das Transportsystem ab.



01



02



03



04



05



06



07



08

Optionen und Zubehör

Geeignet für Röntgenaufnahmen mit C-Bogen (ohne Röntgenkassettenhalter)

01 Geeignet für Röntgenaufnahmen mit Standard-Röntengeräten (mit Röntgenkassettenhalter)

02 5. Rolle zur Transporterleichterung

03 Transportgriff (an einem oder beiden Bettenden)

04 DIN-Schiene 40 x 25 x 10 cm (an einem oder beiden Bettenden)

05 Einfacher Infusionsständer (2 Haken)

06 falt- und teleskopierbarer Infusionsständer (2 Haken)

07 Vertikaler Sauerstoffflaschenhalter, Mod. Nr. 20-0276

08 Monitortablett, Mod. Nr. 20-0346

09 Matratze sprint, Maße 192 x 61 x 6 cm, Mod. Nr. 20-0383

10 Matratze sprint comfort mit 2 cm starker, viskoelastischer Oberfläche, Maße 192 x 61 x 10 cm, Mod. Nr. 20-0384


11 Matratze sprint plus mit Patiententransferpads, Maße 192 x 61 x 6 cm, Mod. Nr. 20-0385

Ohne Abbildung:


- Einsteckbare Transportgriffe (1 Paar) Mod. Nr. 20-0326
- Pulverbeschichtetes Fußteil mit fixiertem HPL-Füllbrett in weiß, Mod. Nr. 20-0327
- Papierrollenhalter, Mod. Nr. 20-0362
- Armauflagen für Blutabnahme, Mod. Nr. 20-0367
- Halterung für 20-0367, Mod. Nr. 20-0368

Ausstattungsmerkmale


- Außenmaße 205 x 75,5 cm
- 2-geteilte Liegefläche 192 x 65 cm mit gasfederunterstützter Rückenlehnenanstellung von 0-70°
- Höhenverstellbereich von 58,5 bis 90,5 cm über hydraulisches Fußpedal
- Schwenkung in Trendelenburg/Antitrendelenburg von jeweils 12° mittels Fußpedal
- 200 mm Tente Integral-Rollen, eine Richtungsrolle, Zentralbremsung
- 4 Aufnahmen für Infusionsständer
- 4 Aufnahmen für Zubehör
- 8 Halterungen unter der Liegefläche
- Sichere Arbeitslast 230 kg
- Mod. Nr. 20-0275

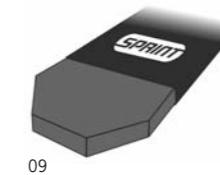

09

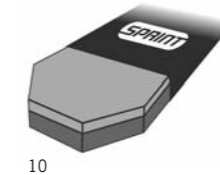

10

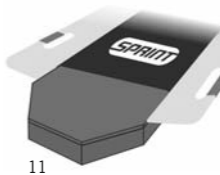

11