



estetica hospitel



wissner-
bosserhoff

hospitel

hospital + hotel = hospitel

De verblijfsduur van de patiënten is een belangrijke factor voor de rentabiliteit van gezondheidsinstellingen. Met name in de postacute patiëntenverzorging, zoals orthopedie, dialyse, geriatrie en in instellingen voor plastische chirurgie en revalidatie, ondersteunt de zgn. "healing environment" de snelle genezing van de patiënt.

Gerieflijkheid, comfort en multifunctionaliteit bieden patiënt en verplegend personeel een maximum aan veiligheid.

wissner-bosserhoff is er op overtuigende wijze in geslaagd om de ziekenhuisbeddenfamilie te combineren met comfortabel design.


Zo bieden wegklapbare hoofd- en voeteneinden het verplegend personeel een ongehinderde toegang tot de patiënten. Bij stroomuitval garandeert een accu dat de elektrische verstelmogelijkheden niet geblokkeerd worden. Een noodverlaging van de rugsteun, die vanaf het hoofdeinde in werking kan worden gesteld, garandeert dat het ligvlak ook in noodgevallen of bij stroomuitval snel in een rechte positie gebracht kan worden. Bij de hospitel-versie hoort ook een handig te bedienen, geïntegreerde ligvlakverlenging tot 2,10m of 2,20m, zodat het bed al naar de behoeften van de patiënt kan worden aangepast. De horizontale stootwielen bieden bescherming tegen beschadigingen bij het verrijden en de zijpanelen met beschermingslijsten maken een probleemloos gebruik van liften mogelijk.



01



02

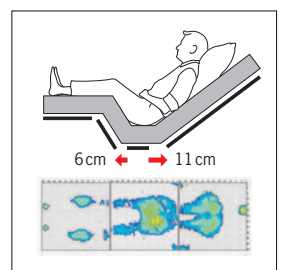

03

01 De "wegklap"-functie van het hoofddeel A-k zorgt voor een snelle toegang tot patiënten en vermijdt kruisinfecties

02 Gedeelde onrusthekken zonder openingen bevorderen de patiëntenmobilisatie en bieden bescherming

03 BiNetic-frame en dubbele retractie – ter voorkoming van doorligwonden en 17 cm meer plaats voor de autocontour- en comfortzitpositie



wissner-
bosserhoff
hospitel



sentida hospitel



hospital + hotel = hospitel

Het risico op een valpartij door onachtzaamheid of bij sportieve activiteiten is reëel. De in Duitsland gevestigde expertstandaard „Sturzprophylaxe“ („voorkoming van valpartijen“) heeft zich als doel gesteld om valpartijen en de gevolgen ervan te voorkomen door risico's en gevaren te erkennen en te vermijden.


Het lage bed sentida hospitel levert een waardevolle bijdrage aan de vermindering van het valrisico. Met het zeer lage ligniveau van de sentida hospitel kan het valrisico ook bij bijzonder actieve bewoners worden gereduceerd en de veiligheid in de slaapfase worden verhoogd. Het in en uit bed stappen is voor kleine bewoners veilig en comfortabel. Door de gedeelde onrusthekken wordt de mobilisatie van de bewoner bevorderd en het risico op een valpartij verlaagd.



01

hospitel – uw voordelen op een rijtje

- rijd- en rembaar op elke lighoogte (centrale rem)
- comfortabel design voor snelle genezing („healing environment“)
- mobilisatievriendelijke onrusthekken: zonder grote middenopening, zonder stijlen en rails
- gemakkelijke reiniging door kunststofoppervlakken
- geen kruisinfectie door het wegklapbare hoofddeel + onrusthek zonder protector
- BiNetic-Frame ter voorkoming van doorligwonden en een ergonomische comfortzitpositie
- automatische functies: Cardiac Chair + elektrische hoogteverstelling van de benen
- met één hand te bedienen CPR, bereikbaar vanaf beide zijden van het bed
- bedverlenging met één hand mogelijk
- geringe instaphoogte bij de sentida (hospitel) vanaf 25 (28) cm tot 79 (82) cm

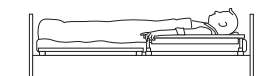

02



03

01 Grote dubbele loopwielen zorgen voor een goede verrijdbaarheid van het bed in elke positie (optie).

02 De lighoogte dicht bij de grond zorgt voor veiligheid tijdens de nachtrust. In deze positie is het voldoende als het onrusthek aan het hoofdeinde op de „oriëntatiepositie“ wordt ingesteld. Onnodige barrières worden zo vermeden en het valrisico wordt geminimaliseerd.

03 Het onrusthek dat als mobilisatiesteun gebruikt kan worden, zorgt voor veiligheid bij het in en uit bed stappen. Daarbij kan het bedniveau aan de lichaamshoogte van de bewoner worden aangepast, zelfs bij zeer kleine bewoners.